



SW

PRACTICIDAD EN PRIMER PLANO





Diseño moderno y tres volúmenes disponibles para garantizar la máxima flexibilidad

La máxima configurabilidad del volumen de la cámara está siempre garantizada, independientemente de las dimensiones externas del autoclave. Excelente practicidad en el uso cotidiano, gracias a sus superficies fáciles de limpiar y a su display intuitivo. Su diseño versátil e higiénico ofrece una gran comodidad sin comprometer la eficacia y la calidad de los procedimientos de esterilización, asegurando un equilibrio ideal entre funcionalidad y facilidad de uso.



Tres volúmenes, un único tamaño

17, 22 y 28 litros son los volúmenes disponibles. Tres capacidades diferentes para escoger la máquina que más se adapta a las propias necesidades. Las medidas externas, idénticas en las tres máquinas, ofrecen una gran facilidad de instalación incluso en caso de montaje empotrado, minimizando el volumen ocupado en las superficies de trabajo.



Versatilidad de carga

Los modelos de 17 y 22 litros cuentan con cinco bandejas y pueden alojar hasta tres cajas. Los modelos de 28 litros se suministran con seis bandejas y pueden alojar hasta cuatro cajas. El portabandeja modular es un accesorio opcional que resalta la versatilidad de carga garantizando la máxima configurabilidad.




Diseño y facilidad de limpieza

El autoclave une estética y funcionalidad con un diseño esencial. Todas sus superficies han sido diseñadas para garantizar la máxima facilidad de limpieza e higienización. El display con pantalla táctil de cristal se integra en esta filosofía de diseño combinando higiene y funcionalidad. Elegancia y practicidad se funden así para ofrecer una experiencia de esterilización de vanguardia.



Display intuitivo

El display táctil 3,2" asegura un control intuitivo y eficaz de la máquina haciendo que el usuario pueda gestionar todo el proceso de esterilización con la máxima simplicidad. Concebido para facilitar cada paso entre las distintas funciones disponibles, su diseño gráfico ofrece una guía visual clara e inmediata.

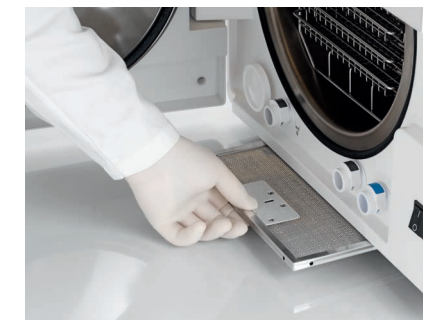

Recordatorios

Es posible activar un servicio de recordatorio específico para la ejecución de los test de rutina. La esterilizadora señalará al operador la necesidad de efectuar los test periódicos previstos: test de vacío y test Helix/Bowie&Dick. También se visualizarán avisos sobre el vencimiento de los plazos de mantenimiento con el fin de mantener la máxima eficiencia y operatividad del dispositivo.



Arranque diferido y secado extra

La opción de arranque diferido permite aplazar el inicio de los ciclos de esterilización para racionalizar el uso de la máquina. La función de secado extra ofrece la posibilidad de programar tiempos de secado personalizados para cargas particularmente difíciles.

Gestión de los autoclaves,
de los informes de los ciclos
y de la asistencia técnica a
distancia

Gracias a la gestión avanzada de los informes del proceso mediante software de descarga automática y a su completa conectividad a través de wifi y puerto Ethernet, la máquina se abre hacia plataformas Cloud para el control y la gestión a distancia del autoclave.

La posibilidad de conectar una impresora de códigos de barras externa completa las principales funciones en materia de trazabilidad y conectividad avanzada.



Descarga de los informes de los ciclos

Los informes generados al terminar cada ciclo quedan memorizados automáticamente en la memoria del autoclave, dotada de una capacidad de 10 000 ciclos. Estos podrán descargarse en formato PDF mediante el puerto USB presente en el dispositivo. El software DataSter suministrado de serie permite descargar automáticamente los informes en una carpeta de la red o del PC.



Instrumentos Cloud

Di.V.A. es un ambiente Cloud opcional para los dispositivos de esterilización. Es útil para archivar los informes de los ciclos, monitorizar el dispositivo y acceder a videotutoriales, manuales y estadísticas de uso. Por su parte, la plataforma Cloud de asistencia a distancia EasyCheck garantiza eficiencia y fiabilidad, reduciendo los tiempos de intervención.




Software de trazabilidad

MyTrace es un software de trazabilidad opcional para autoclaves. Puede instalarse en un PC del consultorio y permite asociar el juego de instrumentos esterilizados con el paciente mediante un código de barras. Gracias al archivo de los ciclos, a la lista de pacientes y a la asociación de los instrumentos estériles, MyTrace se convierte en un recurso insustituible para completar el proceso de trazabilidad y asegurar la protección legal del odontólogo.



Impresora

La gama se completa con una impresora externa opcional capaz de generar informes o etiquetas con códigos de barras: un instrumento útil para completar el proceso de trazabilidad y permitir la asociación entre el ciclo de esterilización y los instrumentos estériles.

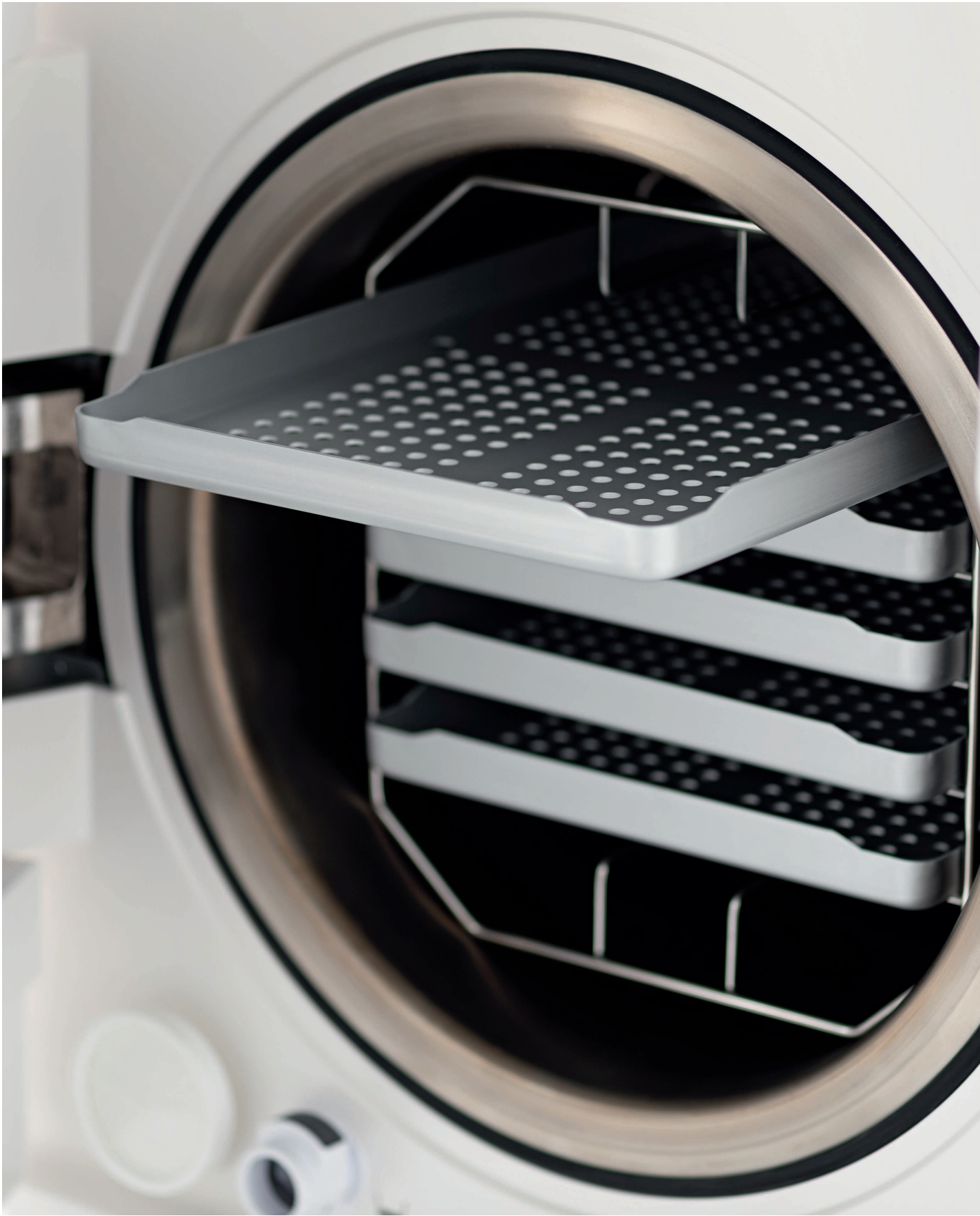

Una gama completa de
accesorios para ampliar
las funciones de SW

1 IMPRESORA EXTERNA

Conectada a las esterilizadoras SW, permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en papel térmico o en etiquetas en formato de código de barras.

2 KIT CARGA FRONTAL

Permite cargar la esterilizadora por el frente mediante una conexión rápida.

3 KIT CARGA AUTOMÁTICA

Compuesto por una bomba externa alimentada por la esterilizadora, permite cargar el depósito principal aspirando agua del tanque externo.

4 KIT EV AUX

Este kit se utiliza para interconectar el autoclave con los sistemas de desmineralización del consultorio de manera que el autoclave solicite agua al sistema cuando sea necesario.

5 PORTABANDEJA MODULAR

Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con tres pares de soportes para alojar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso las cargas más voluminosas.

6 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Gracias al lector, compatible con los PC más comunes, se puede completar el proceso de trazabilidad y asociar las etiquetas de códigos de barras con el paciente.

7 PURE 100

Este sistema, dotado de dos resinas de intercambio iónico, permite eliminar los iones que contaminan el agua de la red hídrica para producir agua desmineralizada de elevada calidad. El dispositivo está controlado totalmente por el autoclave.

8 PURE 500

El desmineralizador, basado en la tecnología de la ósmosis inversa, permite eliminar las sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas en el agua, produciendo agua con características ideales para la esterilización. El dispositivo está controlado totalmente por el autoclave.

9 KIT TWIN PURE 500


A través de este Kit se puede utilizar el desmineralizador Pure 500 en dos autoclaves simultáneamente.



Datos técnicos	SW 17	SW 22	SW 28
Tensión de alimentación	220/240 V 50 Hz 220/230 V 60 Hz		
Potencia nominal	2300 W		
Dimensiones externas (AxHxP)	500 x 490 x 600 mm		
Dimensiones cámara (DxP)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	46 kg	49 kg	52 kg
Capacidad depósito	6 l		
Autonomía (con agua al nivel máx.)	De 9 a 13 ciclos	De 8 a 12 ciclos	De 7 a 11 ciclos

CICLO	Tipo ciclo	Tiempo de esterilización	SW 17	SW 22	SW 28
		[min.]	Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y el tiempo de secado [min.]*		
134 °C Universal	B	4	42	46	56
121 °C Universal	B	20	58	63	69
134 °C RÁPIDO	S	4	22	25	28
134 °C Sólidos envasados	S	4	34	39	45
134 °C Prión	B	18	56	60	70
Xxx °C Custom	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de esterilización a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable de 5 a 30 minutos			
Test de vacío		TEST	18	18	19
Test Helix/B&D		TEST	20	24	28
Test de vacío + Helix/B&D (ejecutados en secuencia)		TEST	42	46	51

*El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina
Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento (1-20 min.)
Nota: los tiempos indicados corresponden a una carga media
Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica

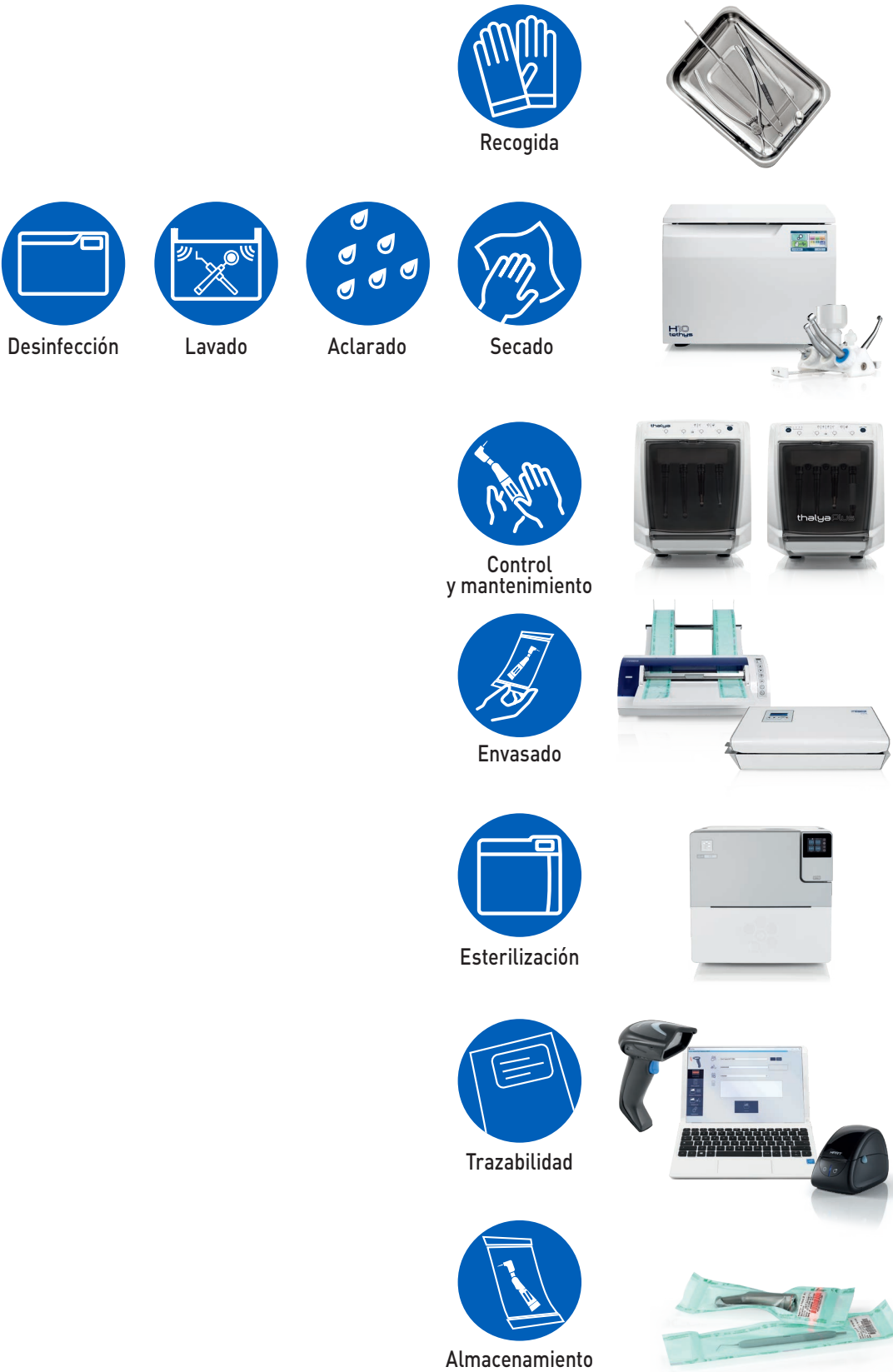

1 Recogida
El protocolo de esterilización empieza con la fase de recogida de instrumentos y materiales.

2 Tethys H10 Plus
Pensado para darte el máximo. Las mejores prestaciones en un flujo de trabajo simple y rápido. Una innovadora termodesinfectadora que sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases precedentes a la esterilización, reduciendo así el trabajo del operador. Dotado del accesorio opcional HMD, Tethys H10 extiende el proceso de reacondicionamiento a los instrumentos rotatorios, reafirmandose como un dispositivo con prestaciones únicas en el mercado.

6 Thalya - Thalya Plus
Thalya es el aliado perfecto para el mantenimiento de los instrumentos rotatorios. Simple e intuitiva, asegura un perfecto mantenimiento mediante la lubricación y la purga de las turbinas y piezas de mano. En la versión Thalya Plus, los instrumentos atraviesan también un proceso de lavado, desinfección y secado dentro de un único ciclo.

7 Millseal
La gama de termoselladoras responde a todo tipo de necesidades. La versión EVO permite crear las bolsas de manera automatizada. Disponible con impresora, la versión Rolling aúna velocidad de sellado y flexibilidad en el tamaño de los envases utilizados. La versión Manual es sinónimo de simplicidad de uso y alta fiabilidad.

8 Autoclaves
Disponibles en las versiones de 17, 22 y 28 litros, los autoclaves Stern Weber simplifican el trabajo del operador optimizando los tiempos y los costes. La calidad del equipo y sus funciones de alto nivel garantizan seguridad, fiabilidad y facilidad de uso.

9 MyTrace
MyTrace es un software de trazabilidad que permite asociar los juegos de instrumentos odontológicos esterilizados con el paciente mediante la lectura de un código de barras o de un código QR.

10 Almacenamiento
Correctamente efectuado, el almacenamiento preserva la esterilidad de los instrumentos a lo largo del tiempo.

Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344
sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601

