



SW PLATINUM

EN EL ÁPICE DE LA ESTERILIZACIÓN





Altas prestaciones y optimización de los consumos de agua

Las dimensiones de la pantalla, sus prestaciones y los estudios efectuados sobre la interfaz de usuario garantizan un uso fácil e inmediato de la esterilizadora. Los componentes adoptados y su avanzado software de gestión aseguran prestaciones de alto nivel al usuario. Los videotutoriales y los avisos luminosos de la interfaz la convierten en un equipo único en su categoría. SW Platinum puede alimentarse con agua de la red y es capaz de recuperar el agua utilizada para los siguientes ciclos. El resultado es una reducción de los costes y una mejora radical en la gestión del abastecimiento y del almacenamiento del agua desmineralizada.



Tiempos de ciclo y Modular Drying
El autoclave cumple los requisitos más exigentes, gracias a sus componentes internos fiables y de altas prestaciones. El sistema de control optimiza el proceso, mientras que la función exclusiva Modular Drying adapta el secado a la carga, reduciendo los tiempos del ciclo. Un ciclo B completo en tan solo 31 minutos.



Comunicación luminosa
El dispositivo comunica también a través de la luz. Gracias a la barra LED integrada en la puerta, el usuario entiende inmediatamente en qué fase del proceso se encuentra el autoclave a simple vista, incluso a distancia.



Videotutoriales, informaciones del display
El display 7" de alta resolución facilita la labor de todos los operadores. Con simples videotutoriales, se proporcionan instrucciones sobre el correcto uso y mantenimiento de la máquina, garantizando así una alta calidad del proceso a lo largo del tiempo.



Control de la calidad del agua
El sensor de conductibilidad integrado asegura el cumplimiento de los parámetros de calidad del agua preservando los componentes internos del dispositivo. También se ocupa de la monitorización del estado del sistema de filtración. Los mensajes visualizados en el display informan claramente al usuario de la necesidad de efectuar la sustitución de los filtros.



Desmineralización integrada
Es posible llenar el depósito principal simplemente con agua de la red, gracias al filtro desmineralizador allí ubicado. La filtración garantiza una sencillez operativa sin precedentes. Los sistemas opcionales automáticos facilitan todavía más la gestión de carga del agua.



Tratamiento del agua utilizada
El filtro de recirculación integrado en el depósito secundario permite purificar el agua utilizada. Esto hace que vuelva a ser utilizable en la próxima esterilización: con tan solo 5 l de agua de la red se pueden efectuar 50 ciclos de esterilización, una eficiencia sin parangón.

Wifi, Cloud para la
asistencia a distancia y
aplicación SterilConnect
para optimizar su gestión

Al conectar el autoclave a la red utilizando el wifi integrado o Ethernet la esterilizadora se abre a un sistema integrado de gestión de los datos, indispensable para una trazabilidad avanzada. El usuario tiene acceso a servicios como el archivo automático de los informes de los ciclos, la consulta in situ o a distancia y la gestión de las impresoras.



SterilConnect
Un instrumento innovador a disposición de los usuarios. Es posible interactuar con el autoclave desde cualquier dispositivo móvil conectado a la red, lo que simplifica la gestión cotidiana del proceso de esterilización. Una interfaz gráfica simple y completa permite monitorizar el estado del dispositivo y gestionar varias funciones de la esterilizadora.



Instrumentos Cloud
Di.V.A. es un ambiente Cloud opcional para los dispositivos de esterilización. Es útil para archivar los informes de los ciclos, monitorizar el dispositivo y acceder a videotutoriales, manuales y estadísticas de uso. Por su parte, la plataforma Cloud de asistencia a distancia EasyCheck garantiza eficiencia y fiabilidad, reduciendo los tiempos de intervención.



Impresora compartida
La impresora opcional completa el proceso de esterilización efectuado con el autoclave. Para optimizar su gestión, es posible compartir la impresora entre varias esterilizadoras habilitadas y conectadas a la misma red. Utilizando una sola estación de impresión, rápida y fiable, se racionaliza el uso de los espacios y se obtiene un ahorro significativo.



Etiquetas con códigos QR
Activando esta función, es posible realizar etiquetas adhesivas de códigos QR para aplicarlas en los envases estériles al final de cada ciclo. El código QR contiene información unívoca para identificar la esterilizadora, el ciclo utilizado, su resultado y la fecha de vencimiento del envase estéril. Escaneando el código QR se pueden asociar los datos que contiene con el paciente, completando así una trazabilidad avanzada. Como alternativa, se pueden imprimir etiquetas con códigos de barras.



Una gama completa de
accesorios para ampliar
las funciones de SW
Platinum

1 IMPRESORA EXTERNA

Conectada a las esterilizadoras SW Platinum, permite imprimir los datos de los ciclos ejecutados en papel térmico o en etiquetas en formato de código de barras o código QR. Para optimizar su gestión, es posible compartir la impresora entre varias esterilizadoras habilitadas y conectadas a la misma red.

2 KIT CARGA FRONTAL

Permite cargar la esterilizadora por el frente mediante una conexión rápida.

3 KIT CARGA AUTOMÁTICA

Compuesto por una bomba externa alimentada por la esterilizadora, permite cargar el depósito principal aspirando agua del tanque externo.

4 KIT EV AUX


Este kit se utiliza para interconectar el autoclave con los sistemas de desmineralización del consultorio de manera que el autoclave solicite agua al sistema cuando sea necesario.

5 PORTABANDEJA MODULAR

Sistema de alojamiento modular para cargar el autoclave. Equipado con tres pares de soportes para alojar las bandejas, permite aprovechar todo el diámetro de la cámara y colocar incluso las cargas más voluminosas.

6 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS/CÓDIGO QR

Gracias al lector, compatible con los PC más comunes, se puede completar el proceso de trazabilidad y asociar las etiquetas de códigos de barras o códigos QR con el paciente.

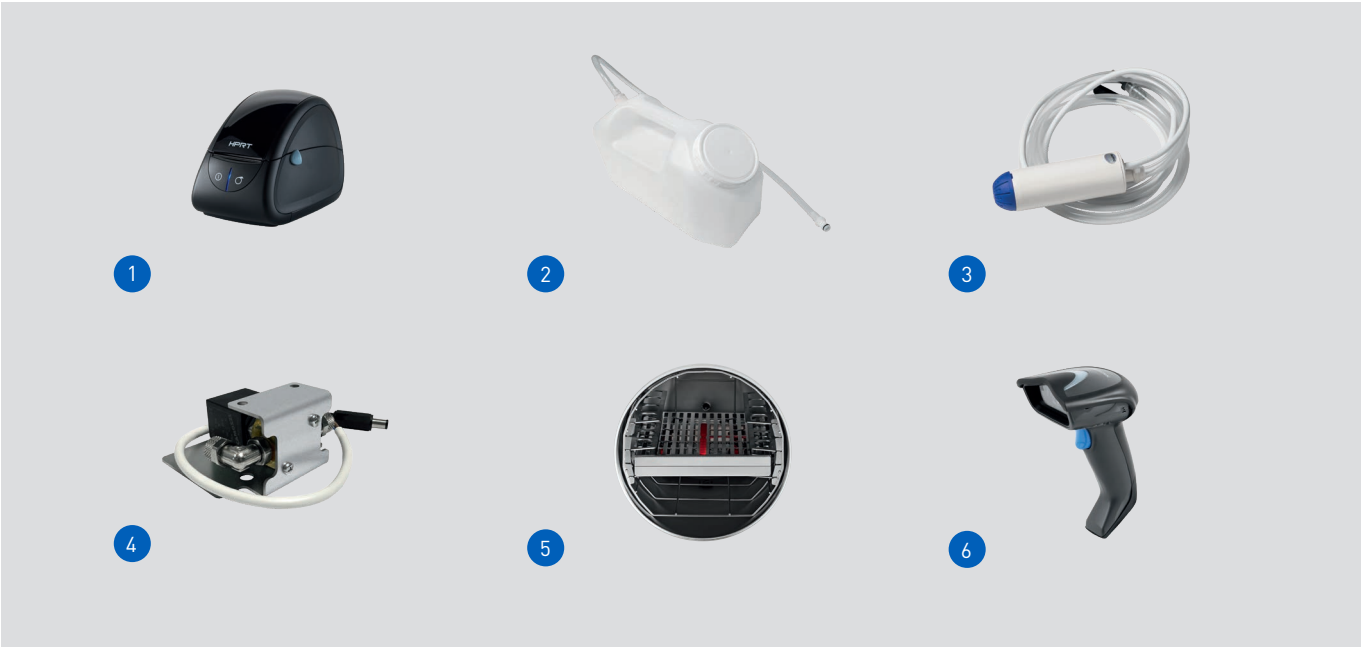

Datos técnicos	SW 17 Platinum	SW 22 Platinum	SW 28 Platinum
Tensión de alimentación	220/240 V 50 Hz 220/230 V 60 Hz		
Potencia nominal	2300 W		
Dimensiones externas (AxHxP)	500 x 490 x 600 mm		
Dimensiones cámara (DxP)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso total	48 kg	51 kg	52 kg
Capacidad depósito	6 l		
Autonomía (con agua al nivel máx.)	De 7 a 11 ciclos	De 6 a 10 ciclos	De 5 a 9 ciclos

CICLO	Tipo ciclo	Tiempo de esterilización	SW 17 Platinum	SW 22 Platinum	SW 28 Platinum
		(min.)	Tiempos ciclo incluyendo el tiempo de esterilización y el tiempo de secado (min.)*		
134 °C Universal	B	4	39 [31]	42 [34]	52 [44]
121 °C Universal	B	20	53 [45]	59 [51]	63 [55]
134 °C RÁPIDO	S	4	21	24	27
134 °C Sólidos envasados	S	4	32 [25]	37 [30]	41 [34]
134 °C Prión	B	18	53 [45]	57 [49]	67 [59]
Xxx °C Custom	S	Ciclo personalizable por el usuario con temperaturas 134 °C / 121 °C, tiempos de esterilización a partir de 4' (134 °C) o 20' (121 °C) y secado programable de 5 a 30 minutos			
Test de vacío		TEST	18	18	19
Test Helix/B&D		TEST	20	24	28
Test de vacío + Helix/B&D (ejecutados en secuencia)		TEST	42	46	51

*El secado varía en función del modelo y del volumen de la máquina

Nota: los tiempos indicados entre paréntesis representan las prestaciones con secado modular activado, respetando las cargas previstas

Nota: los tiempos no consideran el intervalo de precalentamiento

Nota: los tiempos indicados corresponden a una carga media

Nota: el tiempo puede variar en función de la carga y de la alimentación eléctrica



1 Recogida
El protocolo de esterilización empieza con la fase de recogida de instrumentos y materiales.

2 Tethys H10 Plus
Pensado para darte el máximo. Las mejores prestaciones en un flujo de trabajo simple y rápido. Una innovadora termodesinfectadora que sustituye las numerosas actividades manuales típicas de las fases precedentes a la esterilización, reduciendo así el trabajo del operador. Dotado del accesorio opcional HMD, Tethys H10 extiende el proceso de reacondicionamiento a los instrumentos rotatorios, reafirmandose como un dispositivo con prestaciones únicas en el mercado.

6 Thalya - Thalya Plus
Thalya es el aliado perfecto para el mantenimiento de los instrumentos rotatorios. Simple e intuitiva, asegura un perfecto mantenimiento mediante la lubricación y la purga de las turbinas y piezas de mano. En la versión Thalya Plus, los instrumentos atraviesan también un proceso de lavado, desinfección y secado dentro de un único ciclo.

7 Millseal
La gama de termoselladoras responde a todo tipo de necesidades. La versión EVO permite crear las bolsas de manera automatizada. Disponible con impresora, la versión Rolling aúna velocidad de sellado y flexibilidad en el tamaño de los envases utilizados. La versión Manual es sinónimo de simplicidad de uso y alta fiabilidad.

8 Autoclaves
Disponibles en las versiones de 17, 22 y 28 litros, los autoclaves Stern Weber simplifican el trabajo del operador optimizando los tiempos y los costes. La calidad del equipo y sus funciones de alto nivel garantizan seguridad, fiabilidad y facilidad de uso.

9 MyTrace
MyTrace es un software de trazabilidad que permite asociar los juegos de instrumentos odontológicos esterilizados con el paciente mediante la lectura de un código de barras o de un código QR.

10 Almacenamiento
Correctamente efectuado, el almacenamiento preserva la esterilidad de los instrumentos a lo largo del tiempo.

Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344
sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601

