



SW

LAMPADA VENUS PLUS LED MCT VIEW




Venus Plus LED MCT View

Stern Weber ridefinisce l'innovazione con Venus Plus LED MCT View, la lampada che integra una telecamera 4K all'avanguardia, progettata per fornire immagini dettagliate e in alta risoluzione.

La **Liquid-lens** intelligente garantisce una messa a fuoco ultra-rapida, adattandosi automaticamente alle diverse distanze di lavoro.

Grazie allo **Stabilizzatore Digitale**, anche le riprese più complesse risultano perfettamente nitide.

La touch-area consente un'interazione intuitiva per una messa a fuoco ottimale, mentre il no touch sensor e le maniglie autoclavabili ottimizzano l'igiene e il comfort.

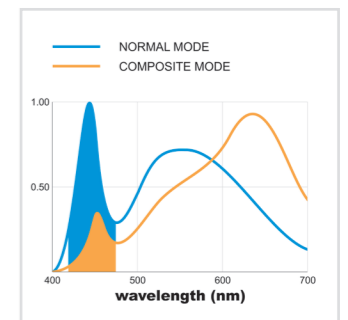

Illuminazione intelligente per la massima performance

Venus LED MCT View offre un'illuminazione personalizzabile che si adatta a ogni fase operativa: 4300K per chirurgia di precisione, 5000K per restauri conservativi e 5500K per un'accurata percezione cromatica.

Modalità composite

La tecnologia avanzata che riduce la lunghezza d'onda tra 430 e 480 nm, ottimizzando il tempo di modellazione dei materiali senza interferire con la polimerizzazione.



Tecnologia avanzata per comunicazione, formazione e sicurezza

MCT View rivoluziona la comunicazione con il paziente e la didattica clinica grazie alla telecamera 4K integrata, che offre immagini ad altissima risoluzione. La possibilità di mostrare i dettagli clinici sul monitor migliora l'interazione e rende più efficace la spiegazione dei trattamenti.

Registrazione e archiviazione intelligente

Grazie al sistema di documentazione digitale, ogni fase del trattamento può essere registrata e archiviata per una gestione avanzata delle cartelle cliniche. I file salvati rappresentano una risorsa preziosa per il controllo della qualità operativa, la tutela e l'assistenza assicurativa.

Integrazione smart e installazione flessibile

Con il software Venus View installato su PC, tutte le funzionalità sono gestibili in modo intuitivo: dall'attivazione della registrazione alla personalizzazione dei settaggi. Il sistema lampada si collega facilmente al monitor del riunito o a parete, con tre opzioni di installazione: integrata, a soffitto o a parete.





Stabilizzatore digitale: la massima precisione in ogni situazione

Il sistema di stabilizzazione digitale assicura riprese perfette e senza vibrazioni, eliminando gli effetti dei movimenti della poltrona, del paziente e del team odontoiatrico.

Full Touch: un controllo smart e avanzato

L'integrazione con la consolle Full Touch permette di gestire registrazioni, zoom e acquisizione immagini direttamente dal riunito, ottimizzando il workflow e riducendo la necessità di interazione con il PC.

Comandi vocali: tecnologia all'avanguardia

I comandi vocali offrono un'interazione fluida e moderna, consentendo di gestire ogni funzione della telecamera senza interrompere l'operatività.



Controllo con pedale: ergonomia e praticità premium

Il joystick del pedale, attivabile in modalità avanzata, permette di gestire la telecamera con un semplice movimento del piede, migliorando ergonomia, efficienza e igiene.



SMCTIT251S00

04/2026

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344

sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601



CE
0051

