



STERFR261S00

Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis. Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones situées en-dehors de l'UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et des spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur de votre zone.

Fiche technique	Millseal+ Evo	Millseal+ Manual	Millseal Rolling
Tension d'alimentation	220/240 Vac	220/240 Vac	220/240 Vac
Fréquence du secteur	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance nominale	150 W - 0.45 A	150 W - 0.45 A	600 W
Dimensions externes (sans rouleau)	474 x 374 x 200 mm (LxPxH)	474 x 374 x 200 mm (LxPxH)	512 x 236 x 145 mm (LxPxH)
Poids	6,5 kg	5 kg	10 kg
Type de soudage	À cycle continu et température constante	À cycle continu et température constante	Rotatif, à cycle continu
Température nominale de fonctionnement	180 °C	180 °C	80 - 190 °C
Hauteur de la bande de soudage	12 mm	12 mm	15 mm
Largeur maximum de soudage	300 mm	300 mm	10 m/min
Matières pouvant être soudées	Papier / polypropylène laminés	Papier / polypropylène laminés	• papier / film plastique accouplés pour stérilisation • Tyvek®/film plastique accouplés pour stérilisation • autres matériaux accouplés compatibles avec la procédure de thermosoudage
Diamètre maxi du rouleau	200 mm	200 mm	



THERMOSOUDEUSES MILLSEAL


HYGIÈNE SANS COMPROMIS



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344
sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601



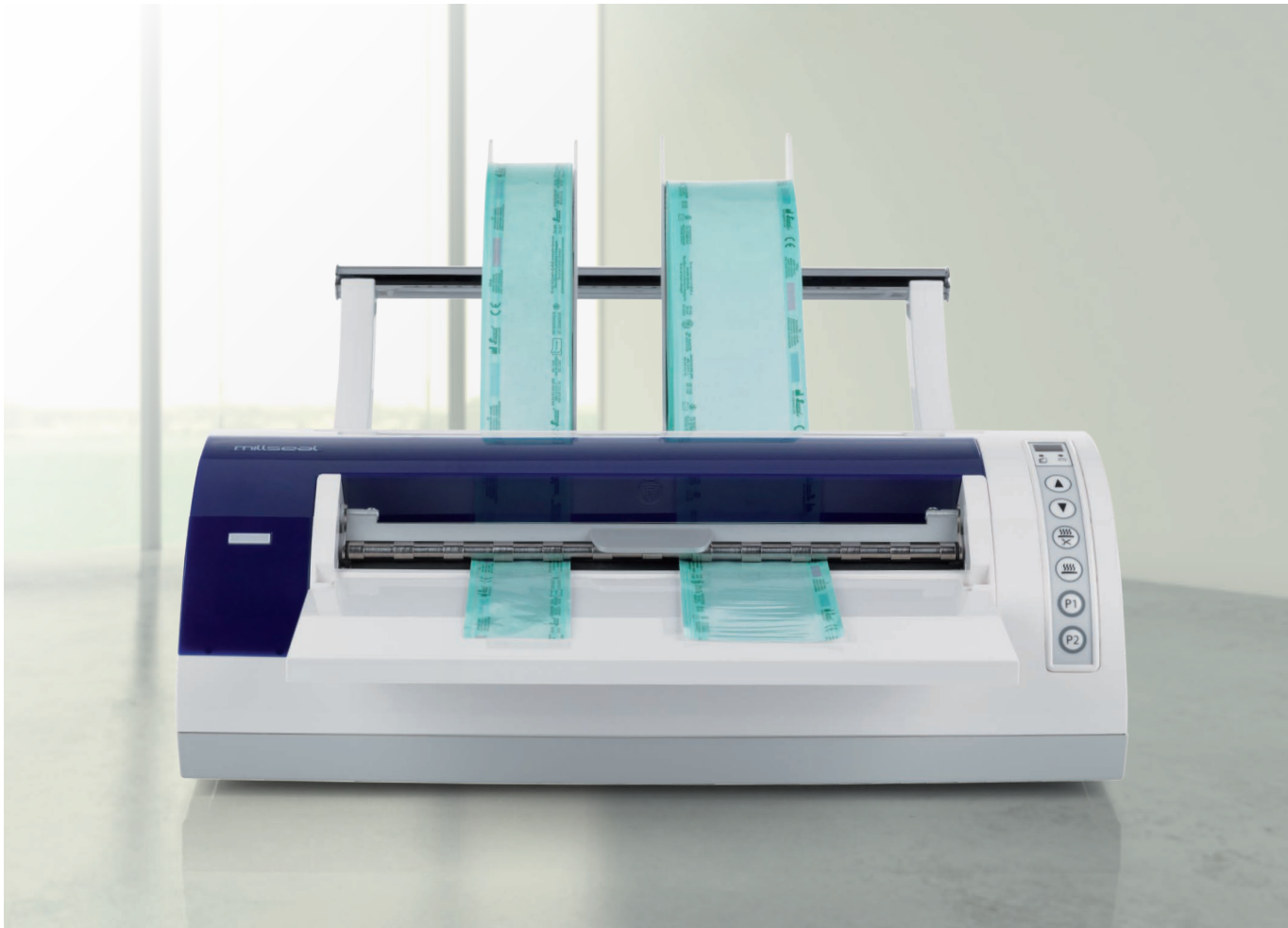

Millseal+ Evo

Millseal, les thermosoudeuses idéales pour protéger vos instruments.

Préserver la stérilité des instruments est une priorité absolue pour ceux qui travaillent dans le secteur médical où il faut prévenir et empêcher toute contamination croisée possible. Une gamme de dispositifs qui, avec des fonctionnalités diversifiées, préservent la stérilité de l'instrument dans le temps et garantissent le respect des paramètres prévus par la loi tout en simplifiant les procédures et en réduisant les temps d'ensachage.




Porte-sachets

Millseal+ Evo
La thermosoudeuse automatique permet de gérer toute la procédure de préparation des sachets et du soudage par quelques touches. Le mouvement motorisé dans les deux sens permet de régler avec précision la longueur des sachets sans gaspiller de papier.



Clavier de commande

Un programme pour toute exigence
Millseal+ Evo permet de programmer deux programmes diversifiés permettant de choisir la longueur ainsi que la quantité des sachets. Après en avoir sélectionné un, la thermosoudeuse prépare automatiquement les sachets. L'opérateur peut en alternative procéder manuellement en ensachant les instruments.

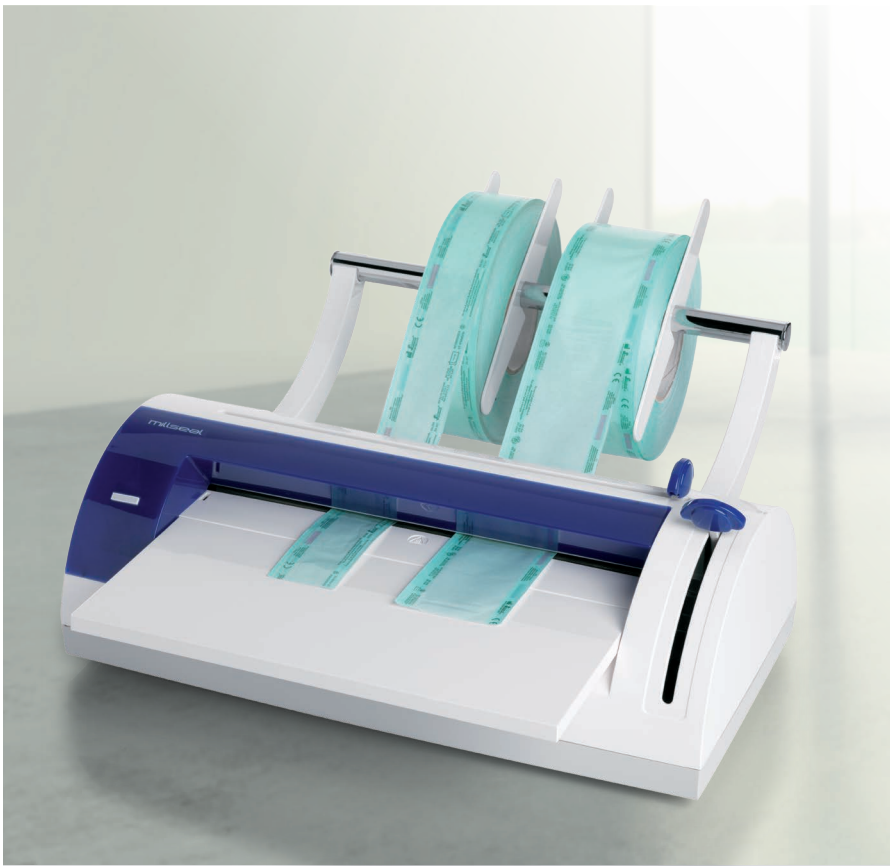

Millseal+ Manual

Thermosoudeuse Millseal+ Manual
La sélection et la coupe de la longueur du sachet s'effectuent manuellement. Pour fermer le sachet contenant le matériel prêt pour la stérilisation, il suffit d'appuyer sur le levier de soudage jusqu'à ce qu'un bip sonore signale la fin de l'opération. Le système de maintien en position du papier évite que le rouleau s'enroule après la coupe et le soudage.



Des performances constantes dans le temps
Le réglage automatique de la température assure un contrôle efficace du chauffage dans la zone de soudage, ce qui préserve la qualité des performances au cours du temps. En outre, les thermosoudeuses Millseal+ offrent un système automatique de protection contre la surchauffe et de mise en état de veille pour économiser de l'énergie.



Millseal+ Rolling

Thermosoudeuse Millseal+ Rolling
Thermosoudeuse à rouleaux avec système d'entraînement automatique. Tout en garantissant une qualité médicale, elle est idéale pour accélérer et optimiser le soudage de sachets pré-découpés et soudés sur 3 côtés. La bande de soudage de 15 mm garantit la stérilité des instruments emballés au cours du temps. Grâce au réglage de la température et de la pression de soudage, on obtient un contrôle efficace du processus de soudage, en assurant des performances élevées et constantes. L'écran grandes dimensions permet de programmer et de visualiser les paramètres de travail de manière simple et intuitive. Les multiples accessoires disponibles (rouleaux, surface d'appui, coupeuses) complètent les fonctions de ce produit.



Afficheur de grandes dimensions



Rouleaux