



STERIT21S00

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico. Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.

Dati tecnici	Millseal+ Evo	Millseal+ Manual	Millseal Rolling
Tensione di alimentazione	220/240 Vac	220/240 Vac	220/240 Vac
Frequenza di rete	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza nominale	150 W - 0.45 A	150 W - 0.45 A	600 W
Dimensioni esterne (senza rotolo)	474 x 374 x 200 mm (LxPxH)	474 x 374 x 200 mm (LxPxH)	512 x 236 x 145 mm (LxPxH)
Peso	6,5 kg	5 kg	10 kg
Tipo di saldatura	A ciclo continuo e temperatura costante	A ciclo continuo e temperatura costante	Rotativa a ciclo continuo
Temperatura nominale di esercizio	180 °C	180 °C	80 - 190 °C
Altezza della banda di saldatura	12 mm	12 mm	15 mm
Larghezza massima di saldatura	300 mm	300 mm	10 m/min
Materiale sigillabile	Laminati in carta/polipropilene	Laminati in carta/polipropilene	• accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione • accoppiato Tyvek®/film plastico per sterilizzazione • altri accoppiati di materiali compatibili con il procedimento di termosigillatura
Diametro massimo del rotolo	200 mm	200 mm	



TERMOSIGILLATRICI MILLSEAL


IGIENE SENZA COMPROMESSI




BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344
sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601



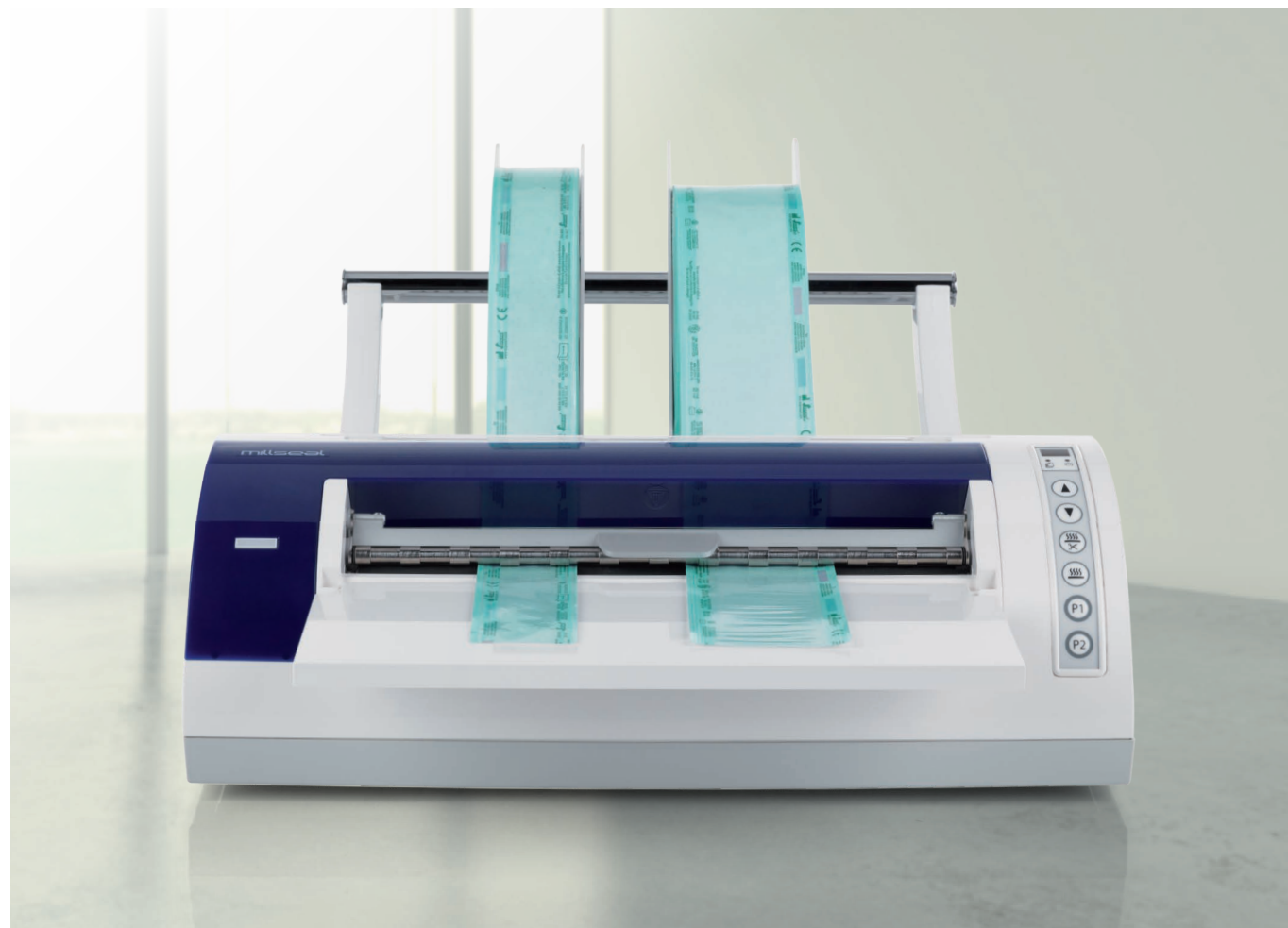

Millseal+ Evo

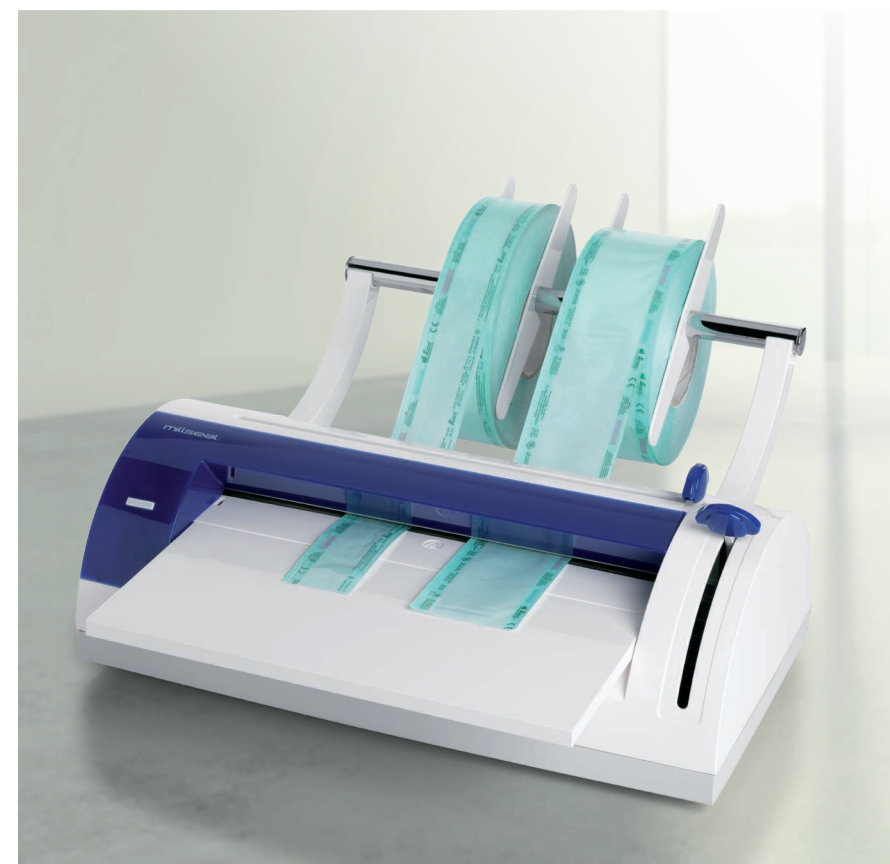

Millseal+ Manual

Millseal, le termosigillatrici ideali per proteggere i tuoi strumenti.

Preservare la sterilità degli strumenti è una priorità assoluta per chi opera nel campo medicale, dove occorre prevenire e impedire ogni possibile contaminazione crociata. Una gamma di dispositivi che, con funzionalità diversificate, garantiscono il mantenimento della sterilità dello strumento nel tempo e il rispetto dei parametri di legge, semplificando le procedure e riducendo i tempi di imbustamento.



Portabuste

Millseal+ Evo

La termosigillatrice automatica permette di gestire l'intera procedura di preparazione delle buste e di sigillatura con semplici tasti. Lo scorrimento motorizzato in entrambe le direzioni permette di regolare precisamente la lunghezza delle buste senza sprechi di carta.




Pulsantiera

Un programma per ogni esigenza

Millseal+ Evo permette di impostare due programmi diversificati per lunghezza e quantità di buste. Dopo averne selezionato uno, la termosigillatrice prepara automaticamente le buste. In alternativa l'operatore può procedere manualmente imbustando gli strumenti in modo tradizionale.

Termosigillatrice Millseal+ Manual

La selezione e il taglio della lunghezza della busta avvengono manualmente. Per chiudere la busta contenente il materiale pronto per la sterilizzazione è sufficiente premere sulla levetta di saldatura fino al segnale acustico di avvenuta sigillatura. Il sistema di mantenimento in posizione della carta evita il riavvolgimento del rullo dopo il taglio e la sigillatura.

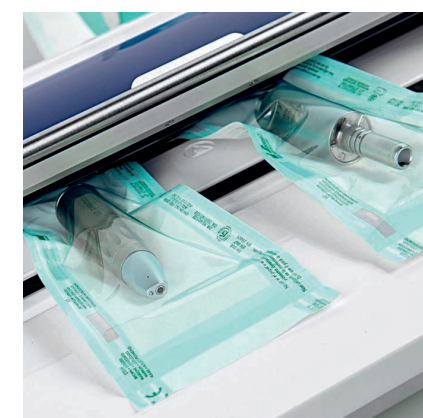

Prestazioni costanti nel tempo

La regolazione automatica della temperatura assicura un efficace controllo del riscaldamento nella zona di saldatura, preservando la qualità delle prestazioni nel tempo. Inoltre, le termosigillatrici Millseal+ offrono un sistema di protezione da surriscaldamento e di stand-by automatico per il risparmio energetico.



Millseal+ Rolling

Termosigillatrice Millseal Rolling

Termosigillatrice a rulli con sistema di trascinamento automatico. Con una qualità di tipo medico, è ideale per velocizzare e ottimizzare la sigillatura di buste pretagliate e saldate su 3 lati. La banda di saldatura da 15 mm garantisce nel tempo la sterilità degli strumenti imbustati. Grazie alla regolazione della temperatura e della pressione di saldatura, è possibile ottenere un efficace controllo del processo di saldatura, assicurando prestazioni elevate e costanti. L'ampio display permette di impostare e visualizzare i parametri operativi in modo semplice e intuitivo. I molteplici accessori disponibili (rulliera, pianetto, taglierina) completano la funzionalità di questo prodotto.



Ampio display



Rulliera