



SW

LÁMPARA VENUS PLUS LED MCT VIEW




Venus Plus LED MCT View

Stern Weber redefine la innovación con Venus Plus LED MCT View: una lámpara que integra una cámara 4 K de vanguardia, diseñada para ofrecer imágenes detalladas y en alta resolución. La **tecnología de lentes líquidas** inteligente garantiza un enfoque ultrarrápido, adaptándose automáticamente a las distintas distancias de trabajo. Gracias al **estabilizador digital**, hasta las grabaciones más complejas resultan sumamente nítidas. El área touch permite una interacción intuitiva asegurando un enfoque perfecto, mientras que el sensor no touch y las agarraderas esterilizables en autoclave optimizan la higiene y el confort.



Iluminación inteligente para optimizar las prestaciones
Venus LED MCT View ofrece una iluminación personalizable que se adapta a cada fase operativa: 4300 K para la cirugía de precisión, 5000 K para las restauraciones conservadoras y 5500 K para una percepción cromática de alta precisión.

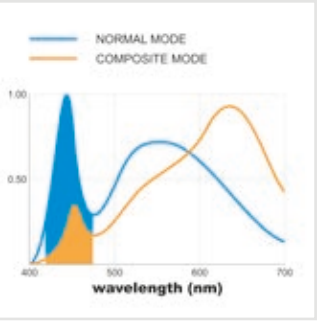

Modo «composite»
Tecnología avanzada, que reduce la longitud de onda a un valor comprendido entre 430 y 480 nm optimizando el tiempo de modelado de los materiales sin interferir con la polimerización.



Tecnología avanzada para la comunicación, la formación y la seguridad

MCT View revoluciona la comunicación con el paciente y la didáctica clínica gracias a la cámara 4 K integrada, que ofrece imágenes de altísima resolución. La visualización los detalles clínicos en el monitor mejora la interacción y hace que la explicación de los tratamientos resulte más eficaz.

Grabación y archivo inteligente

Gracias al sistema de documentación digital, es posible grabar y archivar cada fase del tratamiento para permitir una gestión avanzada de los historiales clínicos. Los archivos guardados representan un valioso recurso para el control de la calidad operativa, la protección legal y la asistencia en materia de seguros.

Integración smart e instalación flexible

Con el software Venus View instalado en el PC, es posible gestionar todas las funciones de manera intuitiva: de la activación de la grabación a la personalización de los ajustes. El sistema lámpara se conecta fácilmente al monitor del equipo o de la pared, con tres opciones de instalación: integrada, de techo o de pared.





Estabilizador digital: la máxima precisión en cualquier situación

El sistema de estabilización digital asegura grabaciones perfectas y sin vibraciones, eliminando los efectos de los movimientos del sillón, del paciente y del personal odontológico.

Full Touch: un control smart y avanzado

La integración con la consola Full Touch permite gestionar las grabaciones, el zoom y la adquisición de imágenes directamente desde el equipo, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo la necesidad de interactuar con el PC.

Comandos de voz: tecnología de vanguardia

Los comandos de voz ofrecen una interacción fluida y moderna, permitiendo gestionar todas las funciones de la cámara sin interrumpir la actividad.



Control con pedal: ergonomía y practicidad premium

Activable en modo avanzado, el joystick del pedal permite gestionar la cámara con un simple movimiento del pie mejorando así su ergonomía, eficiencia e higiene.



Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas fuera de la UE algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344

sternweber.com

Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - **Italy**
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601

