

03/2025 S200SP251S00

Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas fuera de la UE algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



BU Medical Equipment
Sede Legale ed Amministrativa / Headquarters
CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653111
f. +39 0542 653344
sternweber.com


Stabilimento / Plant
Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
t. +39 0542 653441
f. +39 0542 653601



S200

FUNDAMENTO DE LA EVOLUCIÓN

STERNWEBER.COM

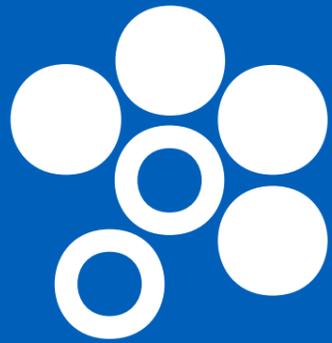

STERN WEBER

COMODIDAD DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA

Caracterizado por las cualidades intrínsecas de la marca Stern Weber, el modelo S200, que incluye una versión para ortodoncistas, ha sido diseñado para garantizar la máxima comodidad del paciente. Su concepto ergonómico ofrece amplios espacios al equipo médico y favorece una operatividad fluida y eficiente.

ALIADO DEL CRECIMIENTO PROFESIONAL

S200 ofrece oportunidades que van mucho más allá de los estándares habituales y pone a disposición las más recientes innovaciones creadas por Stern Weber: puede integrar una gama completa de funciones opcionales e instrumentos especializados facilísimos de utilizar, para alimentar todavía más el crecimiento profesional.

OPCIONES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Gracias a una amplia selección de sistemas de higiene, instrumentos y aplicaciones multimedia opcionales, el médico puede personalizar S200 según sus propias exigencias y aprovechar el potencial de numerosos dispositivos evolucionados.

YOUR TALENT INSPIRES US







Todo lo esencial para la ortodoncia sin renunciar a la calidad Stern Weber

Creado a medida para el ortodoncista, que necesita un ambiente libre de obstáculos inútiles, este modelo apuesta por la esencialidad: bandeja portainstrumentos provista de consola y display en el lado auxiliar, amplio portatray en el brazo pantógrafo y posibilidad de incorporar un monitor LED 22" para compartir las fases del tratamiento con el paciente.



Bandeja ortodóntica

Consola con display alfanumérico para gestionar y manejar los instrumentos. Además de la aspiración, se pueden integrar hasta dos instrumentos dinámicos (turbina y micromotor) y la jeringa. Como alternativa, el médico puede optar por el dispositivo de ablación por ultrasonidos, la lámpara de polimerización o la cámara HD, si el equipo odontológico está predispuesto para el sistema multimedia.



Amplio portatray

Montado en brazo pantógrafo y disponible opcionalmente, el portatray orientable alcanza con comodidad la zona de trabajo y ofrece una superficie espaciosa para los instrumentos del ortodoncista.




Para estar siempre al día con las últimas tecnologías, Stern Weber ha equipado su gama con una conexión web. Esta innovación permite acceder a servicios digitales opcionales que mejoran la eficiencia del consultorio odontológico.

Di.V.A. (Digital Virtual Assistant)


Con Di.V.A., el médico o el propietario de la clínica pueden monitorizar el uso del equipo odontológico, de los instrumentos y de los ciclos de desinfección ejecutados a través de un panel intuitivo. El acceso a los datos resulta cómodo y rápido, dado que es gestionado en un portal web accesible desde cualquier navegador.

En presencia del sensor de paciente, es posible cuantificar con precisión el uso efectivo del sillón. Además, Di.V.A. ofrece la ventaja de permitir un acceso directo a los videotutoriales y al manual de uso del modelo en cuestión.

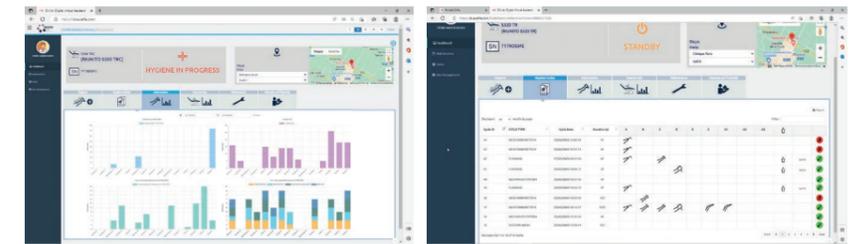

easycheck

Conectado a la web mediante EasyCheck, el equipo odontológico puede beneficiarse también de un servicio de diagnóstico y soporte técnico a distancia en tiempo real: un excelente instrumento para acelerar y gestionar perfectamente la intervención de asistencia y favorecer la labor del técnico.

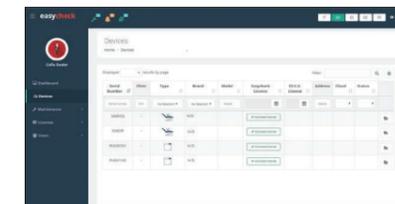



Optar por la máxima comodidad demuestra la atención al bienestar del paciente

Fundamental para favorecer la relación entre el médico y el paciente, también es un factor prioritario para Stern Weber, que propone una amplia gama de opciones que mejoran la comodidad. Provisto de una forma que facilita el acercamiento a la zona de trabajo, el sillón está recubierto con acolchados resistentes, disponibles en un amplio surtido de colores. Fabricado con materiales resistentes y con un sistema mecánico meticulosamente probado, el sillón ofrece el máximo soporte y puede elevar hasta 190 kg. Su respaldo perfilado permite que el personal médico se acerque cómodamente al paciente durante el

tratamiento y resulta ideal para los adultos y los niños en cualquier intervención clínica.

También existe un sensor opcional que se coloca entre el respaldo y el asiento para detectar la presencia del paciente y cuyos datos son procesados por el asistente virtual Di.V.A. con fines estadísticos. Gracias a sus automatismos inteligentes, este sensor contribuye a la sostenibilidad del aparato.



Memory Foam
Un confort excepcional y un correcto soporte anatómico, gracias a las especiales tapicerías opcionales.



Versatilidad en la instalación
Construido de manera que permite utilizar las tomas de alimentación presentes en el suelo, el sillón incluye una conexión situada directamente debajo del reposapiernas o debajo de la parte delantera del grupo hidráulico.



Reposacabezas Atlaxis
El reposacabezas más respetuoso de la autonomía del paciente. Su sencillísimo desbloqueo neumático se activa con un dedo y permite realizar un movimiento orbital para obtener una perfecta colocación, incluyendo el ajuste vertical.



Respaldo Nordic
Suministrado opcionalmente, garantiza una comodidad duradera en las intervenciones prolongadas y presenta una forma perfilada que facilita la labor del médico que trabaja en visión indirecta.



El confort operativo también debe ser una prioridad para el dentista que intenta optimizar su tiempo en el consultorio

En términos ergonómicos, S200 Continental ofrece la máxima flexibilidad para adaptarse fácilmente a los distintos estilos operativos de los odontólogos. La bandeja médico es compacta y ligera, las mangueras de los instrumentos se alargan para no crear tracción en la muñeca y las varillas están equilibradas y no interfieren con la lámpara.

Gracias a su consola touch con negatoscopio incorporado, el médico gestiona las funciones habituales de odontología conservadora leyendo los datos

esenciales y los parámetros operativos en el display alfanumérico.



Consola LCD

La consola con display de pantalla táctil LCD, suministrada con las funciones endodónticas opcionales, permite visualizar también el estado del localizador apical electrónico.



Presionando el pulsador de la agarradera

de la bandeja portainstrumentos, el médico acciona el desbloqueo del freno neumático opcional para regular la altura de la bandeja. S200 tiene incorporado un freno mecánico de serie.



Tray compacto

El tray de acero inoxidable se coloca cómodamente debajo de la bandeja. Orientable, ocupa espacio solamente cuando es necesario.



La racionalización de los espacios operativos y la movilidad de la bandeja

Además de la excelente manejabilidad de la bandeja médico, que alcanza todas las posiciones operativas habituales alrededor del paciente, su diseño mejora el orden en el espacio operativo. Para aumentar su comodidad, el médico puede añadir elementos opcionales, como el sexto instrumento o el negatoscopio. En sus alojamientos, los instrumentos disponen de un soporte seguro y están colocados ergonómicamente en diagonal. La jeringa está situada en la parte inicial de

la funda en posición vertical, para ofrecer un cómodo agarre. La consola se encuentra sobre los instrumentos y está provista de un display amplio y de clara lectura. El médico gestiona los movimientos del sillón, los sistemas de higiene y otros dispositivos integrados. En presencia del display de pantalla táctil LCD suministrado opcionalmente, el médico también tiene a disposición todas las funciones para endodoncia, incluyendo la gestión del localizador apical con visualización de los datos durante los tratamientos radiculares.



Agarradera desmontable

Siempre con vistas a facilitar el desplazamiento de la bandeja, el módulo está provisto de una amplia agarradera que recorre toda su longitud y que puede desmontarse para efectuar las operaciones de limpieza.



Sexto instrumento

La bandeja médico International puede incorporar un sexto instrumento opcional: cámara o lámpara T-LED.



Portatray

Amplio portatray transtorácico montado en la bandeja International.



Negatoscopio

El negatoscopio retroiluminado disponible opcionalmente permite visualizar las imágenes radiográficas, incluyendo las ortopantomografías.



De diseño compacto y esencial, el grupo hídrico puede ser personalizado con elementos de alta gama

Caracterizado por su diseño robusto y simple, S200 permite personalizar el grupo hídrico con elementos que añaden valor al equipo odontológico. El médico puede optar por una escupidera motorizada con sensor óptico, dos variantes del brazo para la bandeja auxiliar y una bandeja con cinco alojamientos. Gracias a la puerta lateral, es fácil acceder al interior del grupo hídrico para efectuar las pequeñas operaciones de mantenimiento cotidiano.



Escupidera

Amplia y confortable, la escupidera puede suministrarse opcionalmente en versión motorizada para acelerar el enjuague y aumentar su comodidad. Incorporado en el grupo de las fuentes, el sensor óptico opcional automatiza el llenado del vaso.



Bandeja auxiliar

La bandeja suministrada incorpora tres alojamientos para las cánulas y la jeringa. En el teclado, protegido higiénicamente con un vidrio, están presentes los mandos para desplazar el sillón, encender la lámpara, enviar agua al vaso y enjuagar la escupidera.



Bandeja opcional

La bandeja auxiliar puede suministrarse en todos los brazos disponibles, de serie y opcionales, incluyendo la versión de cinco alojamientos. El módulo adicional prevé la agregación de dos alojamientos para cámara y lámpara T-LED. Además, es posible integrar una pequeña bandeja portatray de acero inoxidable.



Brazo articulado

Montada sobre doble brazo articulado, la bandeja es regulable en altura y gracias al doble brazo alcanza todas las posiciones necesarias, incluso cuando el médico trabaja sin asistente en el sillón. (opcional).



Brazo doble

Gira y puede posicionarse cómodamente para adaptarse a la intervención que se está llevando a cabo. Fácil de utilizar también por el médico cuando trabaja sin asistente en el sillón. (opcional).



Brazo simple

De volumen reducido sin articulación, el brazo simple permite montar todas las bandejas auxiliar disponibles.



Mayor potencialidad gracias a una selección de instrumentos tecnológicamente evolucionados

Diseñados junto a la electrónica que los gestiona, los instrumentos Stern Weber aseguran excelentes prestaciones y representan una oportunidad concreta para personalizar el equipo odontológico. Gestionando el proceso a través de la consola integrada, el médico alcanza la máxima posibilidad de expresión. Además de la calidad de los instrumentos, los ajustes personalizados, la gestión intuitiva del trabajo y la clara visualización de los datos en un amplio display representan tres ventajas importantes del sistema.



Micromotores i-XR3

Silenciosos, ligeros y versátiles, i-XR3 e i-XR3L son idóneos para las intervenciones de odontología conservadora y protésica. Rango de velocidad de 100 a 40 000 rpm y par de hasta 3,3 Ncm.



Ultrasonidos SC

Dispositivos de ablación por ultrasonidos compatibles con las mejores puntas presentes en el comercio para actividades de profilaxis supragingival y de tipo periodontal. Indicados para la preparación de pequeñas cavidades, pueden utilizarse en las técnicas endodónticas de limpieza de los canales radiculares. Están disponibles con y sin iluminación LED.



T-LED

T-LED tiene un espectro de emisión para la activación de los compuestos de última generación. Con empuñadura giratoria, dispone de una interfaz intuitiva. Entre los 7 programas disponibles encontramos bracket, que consiste en una rápida secuencia de 5 emisiones de breve duración.



Turbinas y contra-ángulos

Turbinas evolucionadas, 6 modelos silenciosos y potentes y una amplia gama de contra-ángulos ergonómicos que satisfacen cualquier necesidad clínica: de las actividades de odontología conservadora a la cirugía de implante o la endodoncia.




Nuevos instrumentos para perfeccionar las intervenciones en odontología conservadora

Hoy los micromotores brushless están disponibles con la innovadora tecnología FIT (Fluorescence-aided Identification Technique) para identificar la presencia de materiales compuestos mediante la fluorescencia producida por la luz LED integrada en el instrumento. Junto a la consola opcional con display de pantalla táctil LCD y al micromotor i-XS4, S200 incorpora todos los elementos necesarios para los tratamientos endodónticos. El localizador apical es gestionado por el software de control en modo ENDO. Durante las intervenciones de endodoncia, el display muestra los datos fundamentales con una visualización simple e intuitiva.



Micromotor i-XS4 FLUO
Todavía más ligero y más silencioso, hoy está disponible con tecnología FIT. Asegura una mayor precisión y velocidad durante la eliminación del viejo compuesto en los dientes que necesitan un nuevo tratamiento. En los tratamientos ortodónticos o estéticos, la eliminación de los brackets es simple, segura y eficaz.

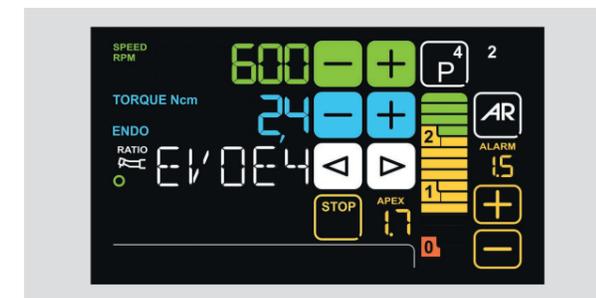

Localizador apical
Con contra-ángulo específico, durante la fase de instrumentación del canal radicular el localizador apical permite visualizar la distancia del ápice en el display. La aproximación al ápice aparece señalada también mediante avisos acústicos y, al alcanzarlo, la rotación del micromotor se interrumpe automáticamente para garantizar una mayor seguridad.



Contra-ángulo EVO E4
Específico para endodoncia con relación 4:1, el contra-ángulo EVO E4 es esterilizable en autoclave y termodesinfectable. El cabezal miniaturizado favorece el acceso al área de tratamiento. Indicado en el tratamiento endodóntico tradicional y con el uso del localizador apical integrado.



Venus LED MCT - Venus LED MCT View

La lámpara Venus LED MCT gira sobre tres ejes para asegurar la perfecta iluminación del campo operatorio en cualquier práctica odontológica y posición. El sensor No Touch enciende, apaga y ajusta la intensidad luminosa hasta 50 000 Lux.

Su innovador sistema permite iluminar con la luz adecuada todas las actividades clínicas con 3 valores de temperatura diferentes: cálida (4300 K), neutra (5000 K) y fría (5500 K).

La fidelidad absoluta de los colores está garantizada por una reproducción cromática que, en una escala de medición (valor de IRC de 0 a 100), es superior a 95.

La función Composite Mode modifica la longitud de onda de la luz para prevenir la prepolimerización de los compuestos garantizando al

mismo tiempo un perfecto nivel de iluminación del campo operatorio. Venus LED MCT View integra una cámara 4 K con software PC para capturar imágenes y vídeos en altísima definición.

El sistema Smart Focus, basado en lentes líquidas, garantiza un enfoque digital rápido y optimizado. Además de mejorar la comunicación médico-paciente, la cámara contribuye a la formación clínica, a la documentación de los tratamientos y a la divulgación académica mediante grabaciones y streaming multimedia. Venus LED MCT View con cámara 4 K integrada es un potente medio de compartición y comprensión de la información clínica que el profesional podrá utilizar con el paciente.

Venus Plus SCT - Venus Plus SCT Composite

Suministrada de serie, Venus Plus SCT es una lámpara LED dotada de 4 fuentes luminosas con un elevado índice de reproducción cromática (>90) para ofrecer una percepción fiel y natural de los colores. La luminosidad puede regularse entre 3000 y 50 000 lux y, gracias a su amplio spot, optimiza la iluminación de la cavidad bucal sin generar sombras molestas. Agarraderas desmontables para la esterilización y dotada de sensor de infrarrojos para el encendido/el apagado/la regulación de la intensidad.

En la versión Venus Plus SCT Composite, a las 4 fuentes luminosas se añaden 2 fuentes centrales que generan un haz luminoso con específicas longitudes de onda que previenen la prepolimerización de los compuestos garantizando al mismo tiempo un excelente nivel de iluminación de la cavidad bucal.



Lo mejor de la tecnología Stern Weber disponible para obtener imágenes HD y asegurar la precisión diagnóstica



C-U2 cámara HD

La cámara favorece la comunicación médico-paciente y el fino diseño de la pieza de mano permite alcanzar fácilmente las zonas distales. La amplia profundidad de campo hace que no resulte necesario el enfoque manual. Acelera el diagnóstico y genera material para documentar las intervenciones y completar los informes clínicos.



Monitor LED 22"

El monitor médico Full HD 16: 9 con resolución 1920 x 1080 píxeles y pantalla plana con panel IPS está predispuerto para la conexión con cable al PC. También está disponible en versión multitouch, con posibilidad de orientar la pantalla.



RXDC – tecnología HyperSphere


Integrado en el equipo odontológico, el radiográfico y el Pda no necesitan otros puntos de instalación. Óptimo paralelismo gracias a la colimación de 30 cm que, asociado al enfoque de 0,4 mm, garantiza excelentes imágenes. Tocando las zonas touch-sensitive, el cabezal se desbloquea y gira libremente alrededor de la junta esférica.



Zen-X – sensor radiográfico

Sensor extraíble con cable USB colocado en la bandeja médico, capaz de capturar imágenes de elevada resolución con dosis mínimas de radiación. Higienizable, el sensor está disponible en dos medidas y cuenta con el certificado IP67 contra la penetración del agua y del polvo.



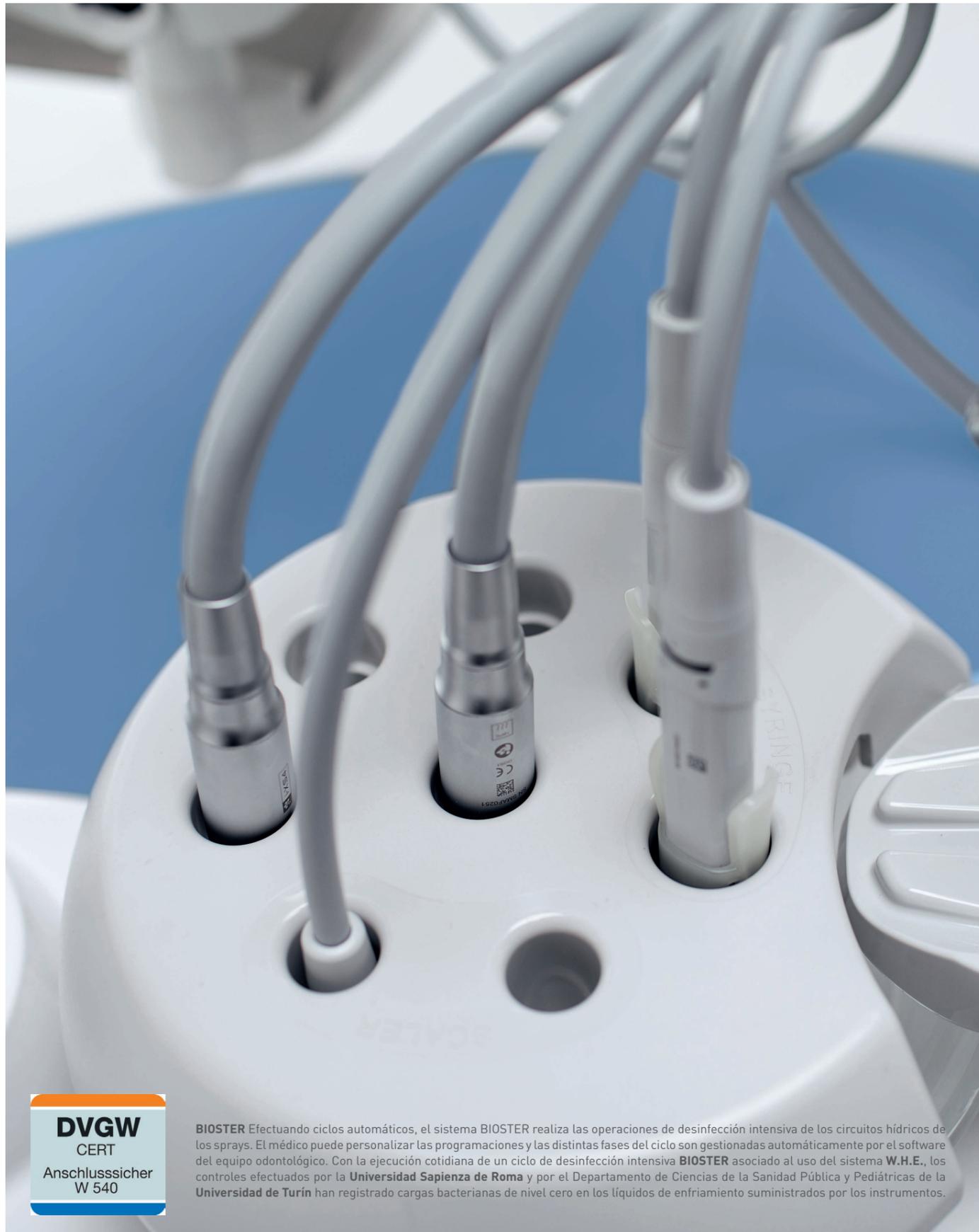

DVGW
CERT
Anschlusssicher
W 540

BIOSTER Efectuando ciclos automáticos, el sistema **BIOSTER** realiza las operaciones de desinfección intensiva de los circuitos hídricos de los sprays. El médico puede personalizar las programaciones y las distintas fases del ciclo son gestionadas automáticamente por el software del equipo odontológico. Con la ejecución cotidiana de un ciclo de desinfección intensiva **BIOSTER** asociado al uso del sistema **W.H.E.**, los controles efectuados por la **Universidad Sapienza de Roma** y por el Departamento de Ciencias de la Sanidad Pública y Pediátricas de la **Universidad de Turín** han registrado cargas bacterianas de nivel cero en los líquidos de enfriamiento suministrados por los instrumentos.

Dispositivos certificados y elementos del equipo odontológico concebidos para garantizar una protección eficaz



Automatic Chip Air

Es un sistema de serie que se ocupa de emitir automáticamente un flujo de aire al terminar de utilizar los instrumentos dinámicos para alejar los residuos líquidos y sólidos de la pieza de mano.



Apoya-instrumentos

La funda que aloja los instrumentos es desmontable y el soporte de los instrumentos, de silicona suave, puede extraerse y desinfectarse en autoclave.



Escupidera

La escupidera de vidrio gira y puede ser desmontada para permitir una meticulosa higienización.



A.C.V.S.

Sistema automático que realiza ciclos de higienización del sistema de aspiración entre un paciente y el siguiente. Práctico y rápido.



I.W.F.C.

Activado desde la consola, el dispositivo asegura la limpieza de los conductos después de un periodo de inactividad de la máquina. Está incluido en el sistema **BIOSTER** o disponible por separado.



W.H.E.

Sistema combinado de desinfección continua a base de Peroxy Ag+ (H₂O₂) conforme a la normativa europea y certificado DVGW y dispositivo de separación entre la red hídrica y los conductos del equipo odontológico. Actúa contra todos los contaminantes acuáticos, incluyendo la Legionella.



SANASPRAY

Depósito de agua destilada para reemplazar el agua de la red.



Protecciones desechables

Las consolas médico y auxiliar están dotadas de protecciones de un solo uso.





Agarradera desmontable Continental

La nueva agarradera de la bandeja médico se desmonta fácilmente para permitir una profunda higienización.



S200	CONTINENTAL	INTERNATIONAL	ORTHO
SISTEMAS DE HIGIENE			
BIOSTER	*	*	*
A.C.V.S.	*	*	*
SANASPRAY	*	*	*
W.H.E.	*	*	*
I.W.F.C.	*	*	*
BANDEJA MÉDICO			
Display Digit	●	●	-
Display LCD touch	*	*	-
Micromotor i-XR3 (100 - 40 000 rpm 3,3 Ncm)	●	●	-
Micromotor i-XR3 L, con fibra óptica	*	*	-
Micromotor i-XR3 L FLUO, con tecnología FIT	*	*	-
Micromotor i-XS4 fibra óptica (100 - 40 000 rpm 5,3 Ncm)	*	*	-
Micromotor i-XS4 fibra óptica FLUO con tecnología FIT	*	*	-
Ultrasonidos (con y sin fibra óptica)	*	*	-
Módulo Midwest con fibra óptica	●	●	-
Jeringa 3 funciones	●	●	-
Jeringa 6 funciones	*	*	-
Localizador apical integrado	*	*	*
GRUPO HÍDRICO			
Escupidera de vidrio	●	●	●
Escupidera de cerámica	*	*	*
Motorización escupidera	*	*	*
Sensor de llenado vaso	*	*	*
Calentador del agua al vaso	*	*	*
Calentamiento del spray	*	*	-
Selección independiente de las cánulas	*	*	*
Portatray auxiliar	*	*	*
Bandeja auxiliar de 3 alojamientos	●	●	-
Bandeja auxiliar de 5 alojamientos	*	*	-
Bandeja auxiliar tipo ortho de 4 alojamientos	-	-	●
Bandeja auxiliar tipo ortho de 5 alojamientos	-	-	*
Venus Plus SCT	●	●	●
Venus Plus SCT Composite	*	*	*
Venus Plus MCT	*	*	*
Venus Plus MCT View	*	*	*
SILLÓN			
Reposacabezas Atlaxis	*	*	*
Brazo derecho móvil	*	*	*
Brazo izquierdo	●	●	●
Sensor de presencia paciente	*	*	*
Mando de pie multifunción	●	●	●
Mando de pie a presión	*	*	*
Mando de pie tipo Power Pedal	*	*	*
Mando de pie wireless multifunción	*	*	*
Mando de pie wireless a presión	*	*	*
Mando de pie tipo Power Pedal - wireless	*	*	*

● de serie * opcional - no disponible



CONTINENTAL

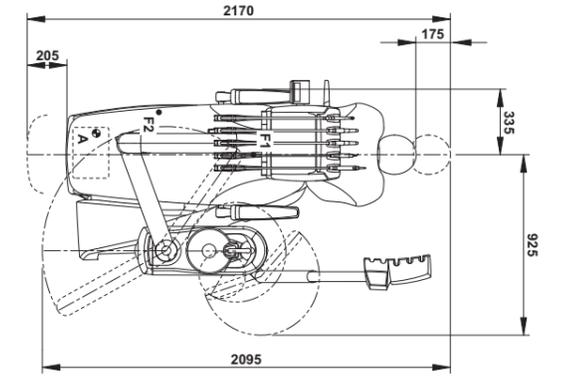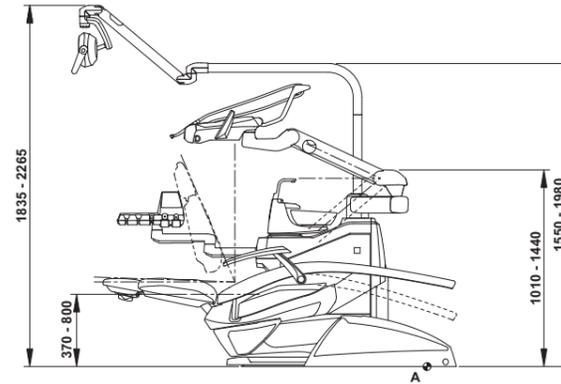

INTERNATIONAL

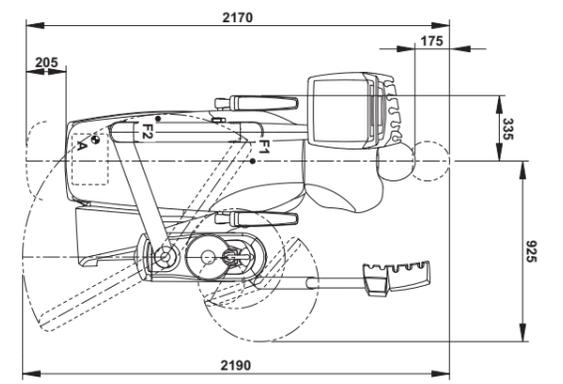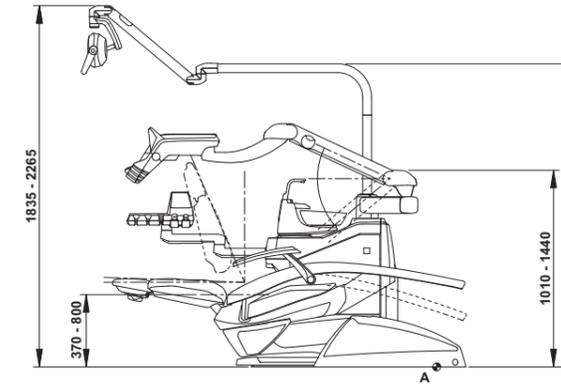

ORTHO

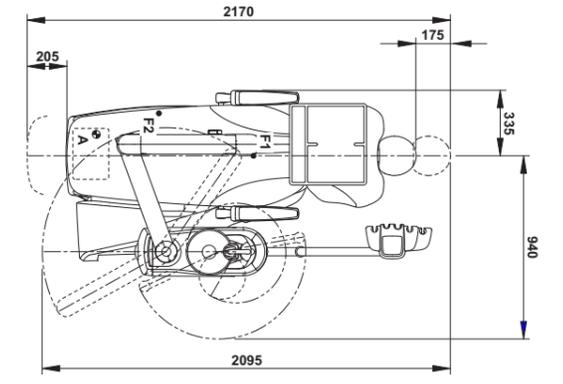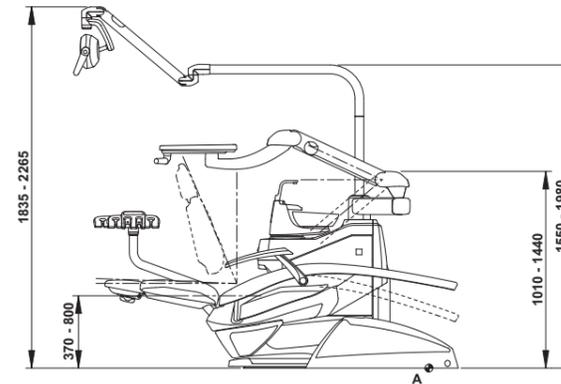

STANDARD	MEMORY FOAM	STANDARD	MEMORY FOAM	STANDARD	MEMORY FOAM
102 azul atlántico	198 azul atlántico	115 salmón escocés	196 azul mediterráneo	142 avellana de Anatolia	172 avellana de Anatolia
106 azul mediterráneo	199 azul pacífico	103 amarillo nevada	182 azul mediterráneo	141 beige papiro	171 beige papiro
113 azul pacífico	183 azul pacífico	123 verde polinesia	183 azul pacífico	143 oro árabe	173 oro árabe
136 azul índico	186 azul índico	101 verde caribe	186 azul índico	140 marrón brasileño	170 marrón brasileño
132 violeta arándano	192 violeta arándano	137 plateado brillante	192 violeta arándano	144 rojo rubí	174 rojo rubí
134 glicina japonesa	184 glicina japonesa	121 gris antracita	184 glicina japonesa		
135 rojo veneciano	194 rojo veneciano	130 negro grafito	194 rojo veneciano		



Las medidas de los dibujos están indicadas en milímetros.